

MEDICA

Productos para la atención de la salud

EasyLyte

www.medicacorp.com

Na^+/K^+

$Na^+/K^+/Cl^-$

$Na^+/K^+/Li^+$

$Na^*/K^*/Ca^{**}/pH$



EasyLyte

fácil por dentro y por fuera

- Fácil de usar

Simple, con menús, operación con indicación Sí/No

Muestras de sangre total, suero, plasma o orina

Resultados impresos automáticamente en menos de 60 segundos

Calibración automática o bajo demanda

Limpieza automática de la sonda

- Fácil de mantener

Todos los calibrantes contenidos en un práctico paquete de soluciones desechables

Todos los desechos recogidos en el paquete de soluciones

Los electrodos desechables no requieren mantenimiento

El diseño modular facilita el mantenimiento del analizador de forma rápida y sencilla

- Fácil de costear

Bajo precio de compra del analizador

Bajo costo por prueba

- Disponible en cuatro modelos:

- EasyLyte Na⁺/K⁺

- EasyLyte**PLUS** Na⁺/K⁺/Cl⁻

- EasyLyte**Lithium** Na⁺/K⁺/Li⁺

EasyLyte**Calcium** Na⁺/K⁺/Ca⁺⁺/pH





EasyLyte

EasyLyte®

Solutions Pack
Kit de soluciones
Confezione di soluzioni
Lösungspackung
Embalagem de Soluções
Kit de soluciones
CE n° 101

MEDICA
MEDICAL EQUIPMENT

Electrodos modulares, de mantenimiento mínimo



Cl⁻



Presionar los botones Sí o No es todo lo que se necesita para analizar suero, plasma o sangre entera

La impresora interna imprime resultados del paciente, valores de calibración, datos de control de calidad y resúmenes de resultados, señalando resultados anormales



K⁺



El Paquete de Soluciones Autocontenidas contiene calibrantes líquidos y recolecta todos los desechos, elimina el contacto con la muestra



El muestreador capilar es extraíble y desechable



EasySampler

El EasySampler modular se conecta rápidamente a los analizadores EasyLyte Na/K, Na/K/Cl y Na/K/Li, mejorando el rendimiento del laboratorio.

- 21 posiciones de muestra
- Posición estad dedicada
- Posiciones QC Normal/Anormal
- Repetición automática opcional de valores fuera de rango

Li+

pH


El software del analizador garantiza facilidad de operación

El software calcula estadísticas de control de calidad, marca resultados anómalos y supervisa el rendimiento.

- Operación con dos botones
- Calibración automática
- Menú fácil de usar

Ca++

Na+

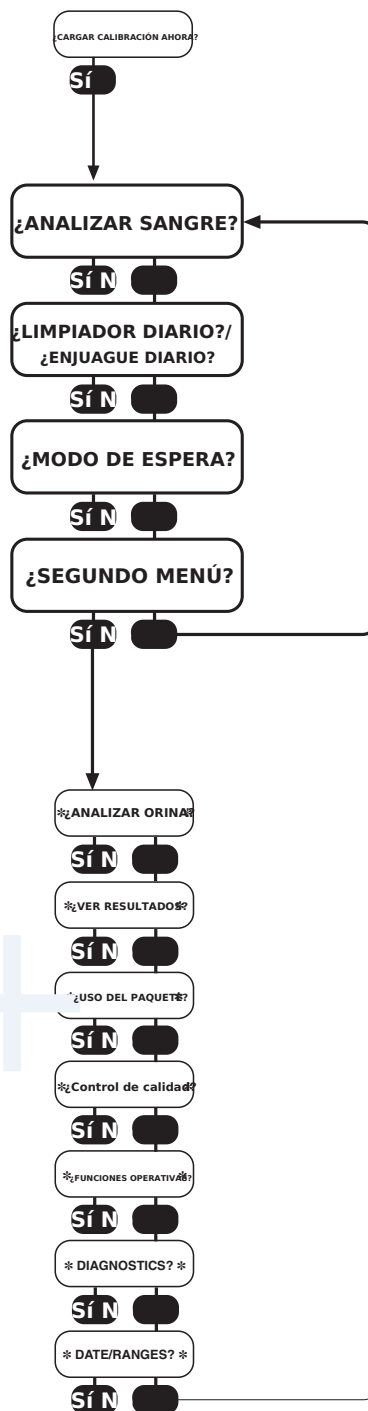

Especificaciones

(Na⁺/K⁺, Na⁺/K⁺/Cl⁻, Na⁺/K⁺/Li⁺, Na⁺/K⁺/Ca⁺⁺/pH)

VEDIC@

Productos para el cuidado de la salud

Clasificación CLIA:	Complejidad moderada			
Tipo de muestra:	Sangre total, suero, plasma o orina			
Tamaño de la muestra:	100 µL Sangre total, Suero, Plasma, 60 µL capilar, o 400 µL diluido (1:10) orina			
Método:	Medición directa por Electrodo Selectivo de Iones (ISE)			
Rango de medición:	Sangre Na+: 20 – 200 mmol/L K+: 0.2 – 40 mmol/L Cl-: 25 – 200 mmol/L Li+: 0.2 – 5.0 mmol/L Ca++: 0.1 – 6.0 mmol/L pH: 6.0 – 8.0 Unidades		Orina Na+: 25 – 1000 mmol/L K+: 1.0 – 500 mmol/L Cl-: 25 – 500 mmol/L	
Resolución de pantalla:	Na+: 0.1 mmol/L K+: 0.01 mmol/L Cl-: 0.1 mmol/L Li+: 0.01 mmol/L Ca++: 0.01 mmol/L pH: 0.005 unidades			
	Na+ /K+]	Na+ /K+ /Cl-	Na+ /K+ /Li+ Na+ /K+ /Ca++ /pH	
Tiempo de análisis (sangre)	55 seg	55 seg	55 seg	60 seg
Modo de orina	Sí	Sí	Sí	No
Tiempo de análisis (orina)	90 seg	90 seg	90 seg	N/A
EasySampler	Sí	Sí	Sí	No
Muestras capilares	Sí	Sí	Sí	No
Almacenamiento de datos:	Resultados del paciente — hasta 128 muestras Resultados de control de calidad — hasta 20 de cada Normal, Bajo y Alto			
Calibración:	Automático o Bajo Demanda			
Salida:	Pantalla gráfica de 128 x 64 píxeles Impresora térmica de 24 columnas Puerto serie (RS-232), puerto EasySampler			
Condiciones ambientales:	15–32°C (60–90°F), <85% de humedad			
Potencia:	100-240 VAC 50/60 Hz, 0.8 A			
Tamaño y Peso:	9.5”An x 16.5”Al x 8.0”Pr (24 cm An x 42 cm Al x 20 cm Pr) 13 lb. (5.8 kg)			

Medica Corporation
5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413
EE. UU.

Teléfono de EE. UU. Continental
800 777 5983

Teléfono internacional
781 275 4892

Fax
781 275 2731

sales@medicacorp.com

www.medicacorp.com

Llama para nuestro CD gratuito